



Etac Hi-Loo med fast montering

Smidiga toalettsitsförhöjare som erbjuder stabilt stöd utan klämrisker.

 **etac**[®]

Toalettsitsförhöjare med stor variation och många möjligheter

Hi-Loo passar de flesta toaletter och sitter ordentligt på plats. Hi-Loo finns både med och utan armstöd.

Armstöd för säkert och tryggt sittande

Armstöden ger ett säkert och tryggt sittande och underlättar vid förflyttning till och från toaletten. Dessutom är armstöden både uppfällbara och avtagbara men kan även fixeras i nedfällt läge. Om det är ont om utrymme bredvid toalettstolen kan man enkelt använda Hi-Loo med bara ett armstöd. Armstöden kan aldrig avmonteras i nedfällt läge vilket ytterligare ökar säkerheten för brukaren.

Två olika höjder

Hi-Loo finns i två olika höjder, 6 cm eller 10 cm. Förhöjarna har stora friktionselement som ger bra stöd mot porslinet. Den ergonomiskt designade sitsen har urtag för intimhygien både fram- och baktill. Sitsen är också uppfällbar och avtagbar vilket underlättar rengöring.



Hi-Loo

Hi-Loo med fast montering är en stabil, säker och diskret toalettförhöjning som uppskattas för sin enkelhet.

Hi-Loo med vinklade armstöd

Hi-Loo II har vinklade armstöd. Dessa används med fördel på väggmonterade toaletter då de tar mindre plats mot väggen i uppfällt läge. Hi-Loo II packas i en mindre förpackning vilket ger logiska och miljömässiga fördelar.

Hi-Loo snedställd

Personer som har nedsatt rörlighet i knä och höft har ofta svårt att sätta sig och resa sig. Därför finns även Hi-Loo med vinklad sits. Den vinklade sitsen är 10 cm hög baktill och 6 cm hög framtill.

Detaljer



Snäpplås

Med snäpplåsfunktionen fäster man smidigt sitsen på plats och det är enkelt att lyfta bort sitsen för rengöring.



Rymligt och säkert sittande

Armstödsform och infästning ger bra stöd samtidigt som det ger gott om utrymme utan klämrisker.



Armstöd

Armstödsplattorna har en rundad form för att alltid ge ett stadigt grepp vid uppresning.



Bekväm och funktionell

Den ergonomiskt designade sitsen har urtag för intimhygien både fram- och baktill.



Stor anläggningsyta mot porslinet

Fästets skoning har stor anläggningsyta och sitter säkert på plats vid montering.



Rena och släta ytor med säkerheten i fokus

Hi-Loo har rena ytor. Infästningen har säkerhetsdetaljer som gjorts orangea för att synas bättre.

Teknisk dokumentation

Benämning:	Beskrivning:	Art.nr:
Hi-Loo fast 6 cm		80301106
Hi-Loo fast 10 cm		80301107
Hi-Loo delmont	med armstöd fast 6 cm	80301316-2
Hi-Loo delmont	med armstöd fast 10 cm	80301317-2
Hi-Loo delmont	med armstöd snedställd	80301318-2

Mått

Höjd på armstöd ovanför sits: 23 cm
 Bredd mellan armstöd: 49 cm
 Ytermått armstöd: 60 cm
 Längd framkant till bakkant: 46 cm
 Sittringens ytermått: Bredd 36,5 cm
 Sittringens innermått: Bredd/Djup: 19,5/27 cm

Mått porslin

Fästhål till inre framkant: minst 35,5 cm
 CC-mått mellan infästningshålen 128-202 mm

Vikt

Hi-Loo fast 6 cm: 2,6 kg
 Hi-Loo fast 10 cm: 3,4 kg
 Hi-Loo delmont med armstöd fast 6 cm: 4,9 kg
 Hi-Loo delmont med armstöd fast 10 cm: 5,8 kg
 Hi-Loo delmont med armstöd snedställd: 5,0 kg

Material

Armstödsrör: Pulverlackerade stålrör
 Armstödsbricka: Polypropen
 Lock och sittring: Polypropen
 Fästnanordning: Aluminium & Polypropen

Max brukarvikt

150 kg



Lösningsmedelsfritt rengöringsmedel med ett pH på 6-9 eller med 70% tvättsprit. Dekontamination vid högst 85°C.

Tillbehör




Fästsats

Underlättar vid montering på porslin där det är trångt undertill vid infästningen.
Art.nr 8030 1052



Fäste för hållare till signalanordning

Art.nr 8030 3038

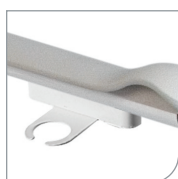

Fäste för signalanordning

Art.nr 8030 3027



Anpassningssats

Ger utökat utrymme mellan infästning och vattentank.

Art.nr: 80304002

Passar produkter med serienummer från och med 80742 (Supporter II) och 73223 (Supporter ställbar)




Toalettpappershållare

Komplett. Fästes på armstöd.
Art.nr 8303 0001



Kantstoppsats Hi-Loo II

Komplett
Art.nr 8030 1030

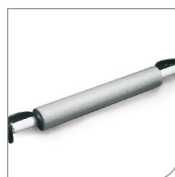

Tvärså 605 mm

Art.nr 8030 3034